

COMFORT LENS PREMIUM

SOLO

ALL-IN-ONE LÖSUNG FÜR ALLE WEICHEN KONTAKTLINSEN
EINSCHLIEßLICH SILIKON-HYDROGEL.

**Zum Desinfizieren, Reinigen, Entfernen von Proteinen,
Aufbewahren und Abspülen der Kontaktlinsen**



Anwendung


1/ Behälter befüllen

Füllen Sie beide Kammern des MicroBlock® Behälters bis zur Fülllinie mit frischer **COMFORT LENS PREMIUM SOLO** Lösung auf.



2/ Manuelle Reinigung

Nehmen Sie eine Linse vom Auge und legen Sie diese auf Ihre Handinnenfläche. Geben Sie auf jede Seite mind. 3 Tropfen **COMFORT LENS PREMIUM SOLO**. Reiben Sie die Linse vorsichtig mit kreisenden Bewegungen mind. 10 Sek. lang. Spülen Sie die Linse gründlich mit **COMFORT LENS PREMIUM SOLO** ab.

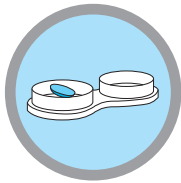


3/ Geben Sie die Linse in die entsprechende Behälterkammer

Tipp: Starten Sie immer mit der gleichen Linse, um Verwechslungen zu vermeiden. Wiederholen Sie die bisherigen Pflegeschritte mit der anderen Linse.



4/ Desinfektion und Aufbewahrung

Bewahren Sie die Linsen mindestens 5 Minuten oder über Nacht in der Lösung auf.

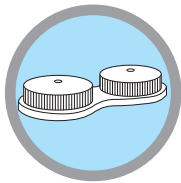

5/ Behälterpflege

Nach dem Aufsetzen der Linsen schütten Sie die gebrauchte Lösung weg, spülen Sie den Behälter mit frischer Lösung aus und verschließen ihn anschließend wieder.

Den MicroBlock® Behälter nicht geöffnet an der Luft trocknen.

MS7401MCO/001

COMFORT LENS PREMIUM

SOLO

ALL-IN-ONE LÖSUNG FÜR ALLE WEICHEN KONTAKTLINSEN
EINSCHLIEßLICH SILIKON-HYDROGEL.

Sicher, leistungsstark und komfortabel:



HydroLock® EFFECT

Die Wirkstoffkombination aus Pro-Vitamin B5 und Sorbitol sorgt dafür, dass Ihre Kontaktlinsen gut benetzt sind und somit lange und komfortabel getragen werden können.



5-MINUTEN-OPTION

Schnelle und sichere Desinfektion in nur 5 Minuten für die optimale Erfrischung der Kontaktlinsen zwischendurch.



MicroBlock® BEHÄLTER

Antibakterieller Kontaktlinsenbehälter für höhere Sicherheit gegen mikrobielle Verschmutzung.

